

# Drain Disinfectant

## Comment utiliser

**clinell**<sup>TM</sup>  
SURFACE

### Utilisation combinée du Clinell Drain Disinfectant (CSDD24) et des lingettes à l'acide peracétique Clinell (CS25)


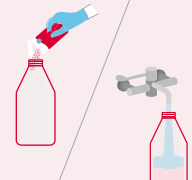


Le Clinell Drain Disinfectant tue, élimine et prévient la formation de biofilms, y compris les bactéries Gram-négatives hautement résistantes.

À utiliser dans les éviers, les douches et les drains pour lutter contre les agents pathogènes tenaces.







## Mode d'emploi

Étape 1. Préparation du Clinell Drain Disinfectant (CSDD24)

<b>1.</b> 	<b>2.</b> 	<b>3.</b> 	<b>4.</b> 
Portez l'équipement de protection individuelle (EPI) recommandé	Prenez un récipient Clinell et versez-y le contenu d'un sachet (30 g) Clinell Drain Disinfectant. Ajoutez 500 ml d'eau tiède dans le récipient Clinell	Remettez le couvercle pour éviter les débordements. Attendre au maximum 5 minutes pour que le produit soit activé	Remuer l'emballage en mouvements circulaires pour mélanger le produit (ne pas secouer)

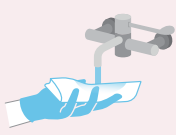
Étape 2 (suite): Décontamination de l'évier et du robinet avec la lingette Clinell à l'acide peracétique (CS25)

<b>1.</b> 	<b>2.</b> 	<b>3.</b> 	<b>4.</b> 
Prenez une lingette dans l'emballage. Humidifiez-la entièrement à l'eau du robinet	Pressez doucement l'excédent d'eau de la lingette dans le drain de l'évier	Traiter d'abord le robinet, en commençant par le propre et en terminant par le sale (d'abord le corps du robinet, puis le levier, ensuite la sortie d'eau)	Utilisez la même lingette pour traiter l'évier, en procédant du propre au sale (le lavabo d'abord, puis le drain)

**Suivez toujours les directives locales concernant les équipements de protection individuelle (EPI)**


### Étape 3: application du Clinell Drain Disinfectant (CSDD24)

1.

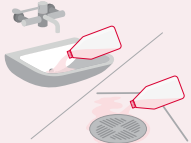

Versez tout le contenu du récipient dans la canalisation, en veillant à ce que la grille soit bien recouverte

2.



Étalez la lingette usagée sur la grille de drainage si présente

3.



Si le drain est ouvert, tournez partiellement la lingette dans l'ouverture du drain

### Étape 4: laisser agir et terminer

1.



Laissez agir la lingette pendant toute la durée d'action du Clinell Drain Disinfectant (au moins 15 minutes)

2.



Placez le ruban indicateur Clinell Drain Disinfectant sur l'évier/la poignée de la douche pour éviter toute utilisation

3.



Attendez au moins 15 minutes. **N'UTILISEZ PAS L'ÉVIER PENDANT CETTE PÉRIODE**

4.



Retirez le ruban indicateur et jetez la lingette conformément aux instructions locales relatives aux déchets contaminés

5.



Ouvrez le robinet pendant ± 15 secondes pour rincer la canalisation avec de l'eau chaude ou froide

6.



Rincez le récipient et conservez-le pour une utilisation ultérieure

Utilisez les biocides en toute sécurité. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.

Dialex Biomedica, GAMA Healthcare distributor

**dialex**  
BIOMEDICA

**Dialex Biomedica NV**, Caetsbeekstraat 1, 3740 Bilzen, België  
T: +32 (0) 89 41 71 40 | E: [info@dialexbiomedica.be](mailto:info@dialexbiomedica.be)  
[dialexbiomedica.be](http://dialexbiomedica.be)

JBN250150FR

**gama**  
healthcare